


Camilo[®]


Elektronisk personvægt

Manual

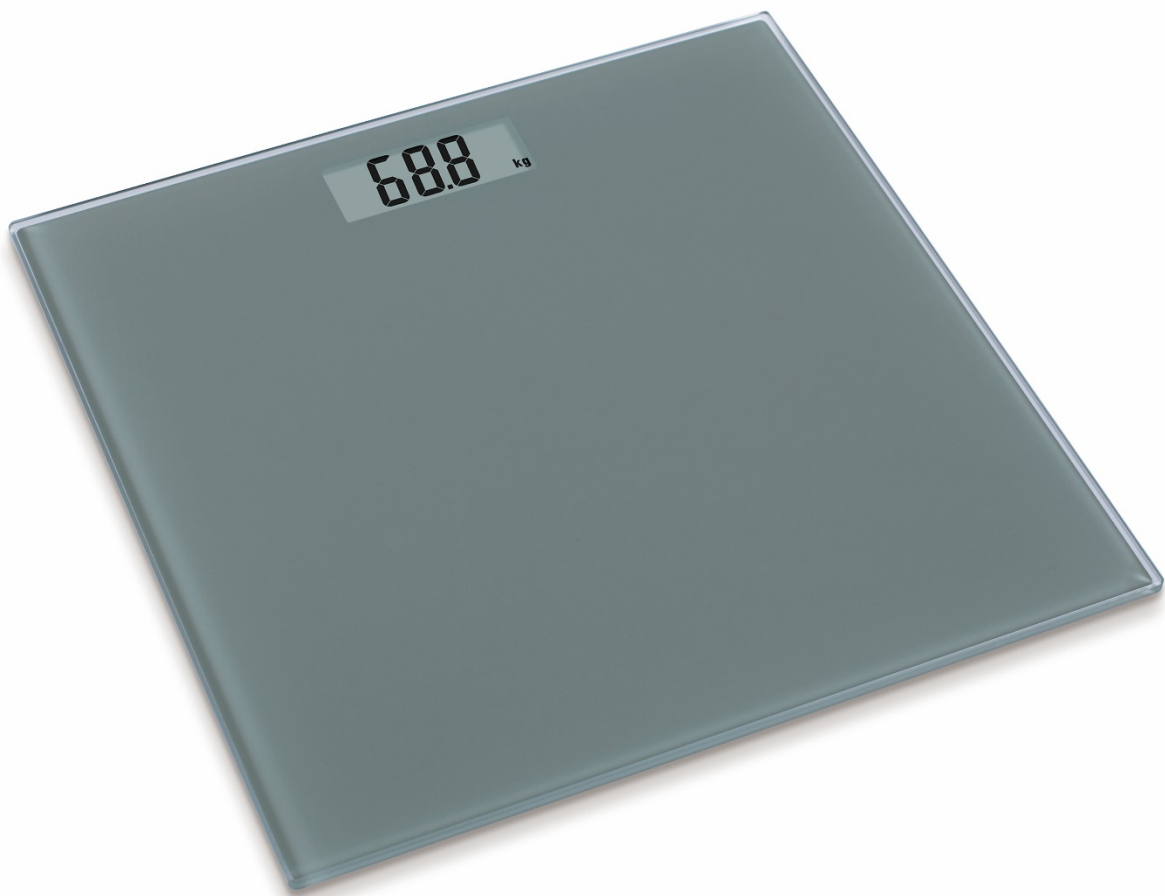


Batteri

Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende

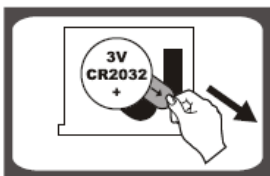


Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations stykke fra batteri kontakten før brug.

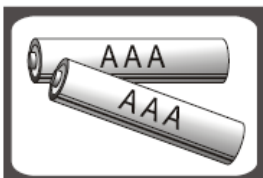

Type 2. 2x1 .5V AAA batterier (ikke inkluderet)

Udskiftning af batteri

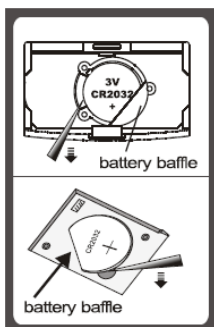


Billede 1

Forhold 1:Åben batteri coveret på bagsiden af vægten, hvis det er typen der er vist på billede 1

- Tag det brugte batteri ud med hjælp fra en spids genstand, som vist på billede 1.
- Isæt nyt batteri ved at isætte den ene side af batteriet under pladen og herefter presse den anden side ned.

Vær opmærksom på polariteten!

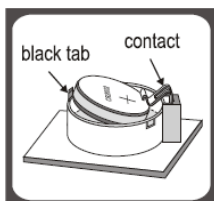


Billede 2

Forhold 2:Åben batteri coveret på bagsiden af vægten, hvis det er typen der er vist på billede 2.

- Træk den sorte strop udaf og batteriet vil komme ud.
- Isæt nyt batteri ved at putte den ene side af batteriet under kontakten og herefter presse ned på den anden side.

Vær opmærksom på polariteten!

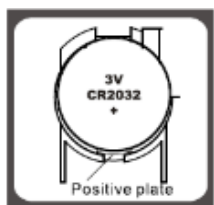

Billede 3

Forhold 3:Åben batteri coveret på bagsiden af vægten, hvis det er typen der er vist på billede 3.

- Tryk forsigtigt på batteriet og det vil automatisk hoppe op.
- Isæt nyt batteri, ved at isætte batteri på pladen med positiv, tryk herefter på den anden side. Vær opmærksom på polariteten!




Billede 4

Forhold 4: Åben battericoveret på bagsiden af vægten hvis det typen der er vist på billede 4

- A. Tag de brugte batterier ud (med hjælp fra en spids genstand hvis nødvendigt.)
- B. Isæt nye batterier ved at isætte den ene ende og herefter trykke ned på den anden ende.

Vær opmærksom på polariteten!

Brug

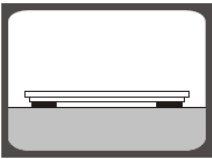

Step 1: For at sikre nøjagtigheden, placer vægten på et hårdt og fladt gulv og undgå tæpper og bløde overflader.

Bemærk: Hvis vægten er en "slim" model (indikeres på pakken) skal den sættes på hårde overflader så som marmor, gulv fliser osv. Og der skal sikres at der ikke er noget under vægten før vejning.



Step 2. Træd stille og roligt op på vægten og vægten vil automatisk tænde. Stå jævnt på vægten uden at bevæge dig og vent til vægten i displayet er stabilt og låses fast.


Automatisk sluk



Når du træder af vægten, vil den automatisk slukke. Automatisk sluk sker når displayet har vist den samme vægt i omtrent 8 sekunder.


Skift af vægt enhed

Hvis vægten er med mulighed for at måle både på den metriske (kg) og den britiske skala (lb og st) kan du skifte vægten ved følgende:

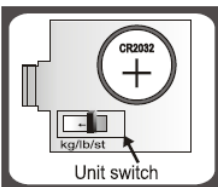


Forhold 1: Hvis omskifteren er ved batteriet:

- A. Åben batteri coveret på bagsiden af vægten.
- B. Træk omskifteren op eller ned for ændring i skala, mellem kg-lb-st.

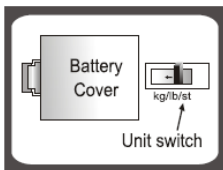

Forhold 2: Hvis omskifteren sidder på bagsiden af vægten:

- A. Find omskifteren på bagsiden af vægten.
- B. Træk omskifteren op eller ned for ændring i skala mellem kg-lb-st.

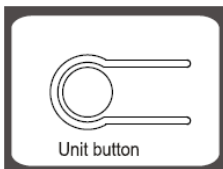

Forhold 3: Hvis omskifter knappen sidder på bagsiden af vægten:

- C. Find knappen på bagsiden af vægten.
- D. Tryk på omskifter knappen mens vægten er tændt, LCD displayet viser nuværende vægt enhed, tryk på knappen igen for at ændre vægt enhed

Advarsel indikationer



Lavt batteri indikation

Batteriet er lavt på strøm, du skal udskifte med et nyt batteri.



Overbelastning indikation

Emnet der vejes på platformen overstiger den maksimale kapacitet på vægten. Venligst træng ned for at undgå skader.



Gentest

Fejl er sket, du skal genteste for at få det korrekte resultat

RÅD TIL BRUG & VEDLIGEHOLDELSE


1. Platformen af glas, er glat når den er våd. Hold den tør.
2. Stå stille når vejningen foretages
3. Slå, kast eler tab ikke vægten
4. Pas på vægten, da det er et præcisions redskab
5. Rengør vægten med en fugtig klud og undgå at vand trænger ind i vægten. BRUG IKKE kemikalier/hårde rengøringsmidler.
6. Opbevar vægten et køligt sted med tør luft.
7. Hold altid vægten i en horisontal position.
8. Hvis vægten ikke vil tænde, tjek om der er batteri i eller der er strøm på batteri. Isæt eller skift til nyt batteri.
9. Hvis der er fejl i display eller vægten ikke slukker efter lang tid, tag batteriet ud i omkring 3 sekunder og isæt det igen for at fjerne fejl. Løser dette ikke problemet, kontakt da forhandleren.
10. Kun til brug i private husholdninger.



Camilo[®]


Elektronisk personvåg

Manual

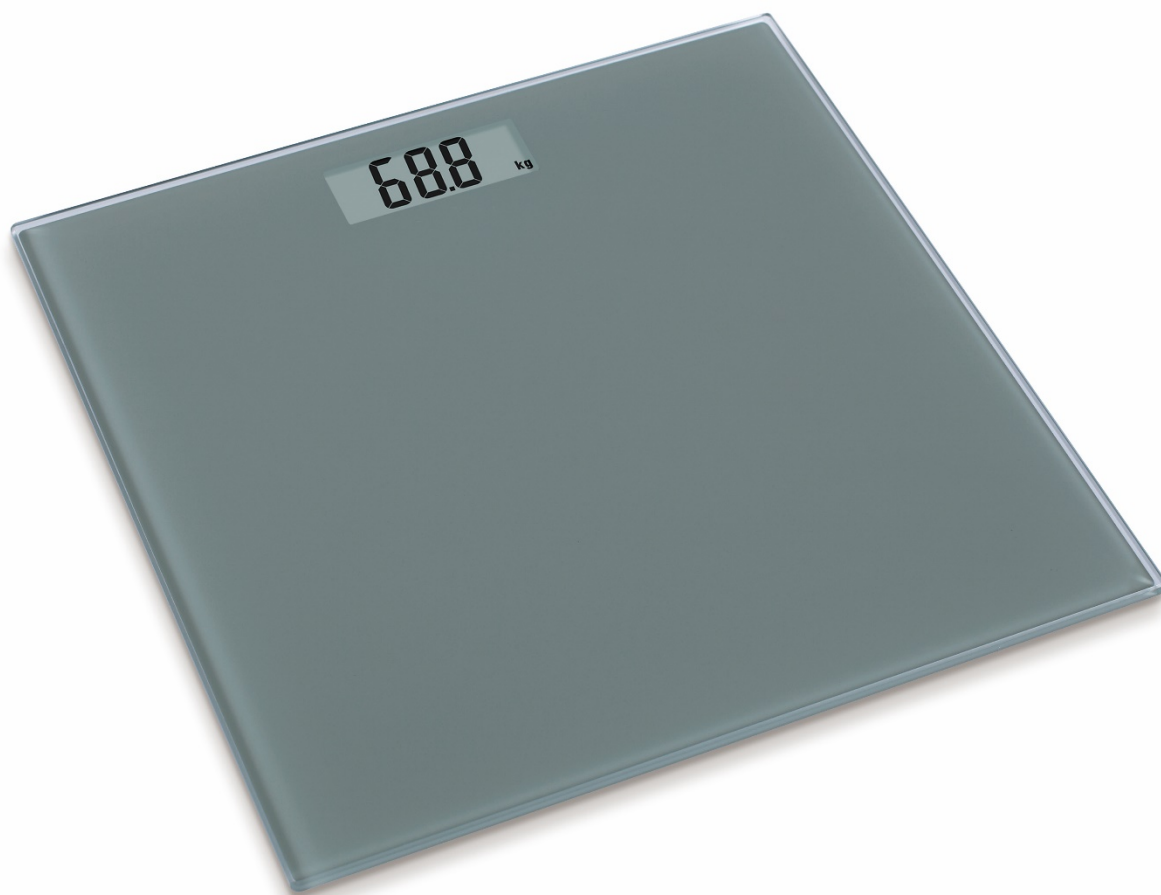


Batteri

Batteritypen i vågen beror på produktens modell. Kolla vilket batteri din våg använder.

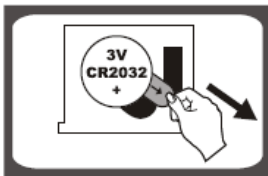


Typ 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Ta bort isolations stycket från batteri kontakten innan användning.

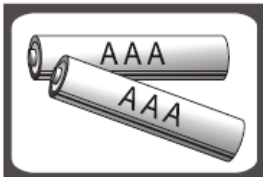

Typ 2. 2x1 .5V AAA batterier, exkl

Byte av batteri

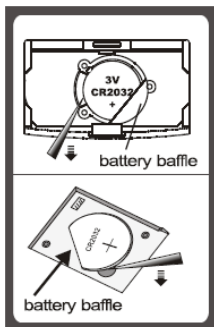


Fiigur 1

Fall 1: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas på figur 1.

- E. Ta ut det använda batteriet med ett vasst föremål enligt figur 1.
- F. Sätt i det nya batteriet genom att sätta i ena sidan av batteriet under plattan och sedan trycka ned den andra sidan.

Var uppmärksam på polariteten!

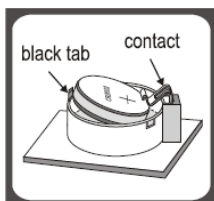


Figur 2

Fall 2: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas på figur 2.

- C. Dra det svarta bandet utåt för att få ut batteriet.
- D. Sätt i det nya batteriet genom att sätta i ena sidan av batteriet under kontakten och sedan trycka ned den andra sidan.

Var uppmärksam på polariteten!

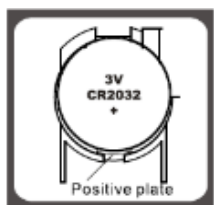

Figur 3

Fall 3: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas på figur 3.

- C. Tryck försiktigt på batteriet för att få det att hoppa upp automatisk.
- D. Sätt i ett nytt batteri genom att sätta i det på den positiva plattan. Truck sedan på den andra sidan. Var uppmärksam på polariteten!




Fall 4

Fall 4: Öppna batteriluckan på vågens baksida om det är av den typ som visas på figur 4.

- C. Ta ut de använda batterierna med ett spetsigt föremål om det behövs.
- D. Sätt i de nya batterierna genom att sätta i den ena sidan varefter den andra sidan trycks ned.

Var uppmärksam på polariteten!

Användning

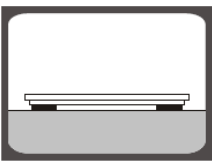

Steg 1: Placera vågen på ett hårt och plant underlag och undvik mattor och mjuka ytor för att säkerställa noggrannheten.

Observera: Om vågen är av modellen "slim" (anges på förpackningen) måste den placeras på ett hårt underlag som marmor, kakel m.m. Man måste även säkerställa att det inte finns någonting under vågen innan användning.



Steg 2. Ställ dig försiktigt på vågen varefter vågen kommer att tändas automatiskt. Stå stadigt på vågen utan att röra dig och vänta tills vågens display har stabiliserats kring ett värde


Automatisk avstängning



När du går av vågen kommer den automatiskt att stängas av. Funktionen träder i kraft när displayen har visat samma vikt i ungefär 8 sekunder.


Byte av viktenhet

Om vågen har möjlighet att väga med både den metriska (kg) och den brittiska skalan (lb och st) kan du ändra enheten på följande sätt:

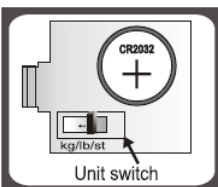


Fall 1: Om knappen är placerad vid batteriet:

- C. Öppna batteriskyddet på vågens baksida.
- D. Dra knappen uppåt eller nedåt för att ändra skalan mellan kg-lb-st.

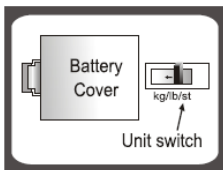

Fall 2: Om knappen är placerad på vågens baksida:

- C. Hitta knappen på vågens baksida.
- D. Dra knappen uppåt eller nedåt för att ändra skalan mellan kg-lb-st.

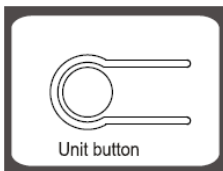

Fall 3: Om knappen är placerad på vågens baksida:

- G. Hitta knappen på vågens baksida.
- H. Tryck på knappen medan vågen är igång. LCD-displayen visar den aktuella viktenheten. Tryck på knappen igen för att ändra skalan.

Varning indikationer



Indikation lite batteri

Batteristyrkan är låg. Sätt i ett nytt batteri.



Indikation överbelastning

Viktöverbelastning. (Max viktkapacitet indikeras på vågen). Gå av vågen för att undvika skador.



Omtest

Om displayen visar "[" när du går av vågen, innebär det att det uppstått ett fel under vägningen. Försök igen.

TIPS FÖR ANVÄNDNING OCH HANTERING

11. Plattformen av glas, är hal när den är blöt. Håll den torr.
12. Stå still när du använder vågen.
13. Slå inte på, kasta eller tappa inte vågen
14. Ta hand om vågen då den är ett precisionsredskap.
15. Rengör vågen med en fuktig trasa och undvik att det kommer in vatten i den. ANVÄND INTE kemikalier/starka rengöringsmedel.
16. Förvara vågen på en sval plats med torr luft.
17. Ha alltid vågen i ett horisontellt läge.
18. Om vågen inte går att tända bör man kontrollera att batteriet sitter i eller om det finns ström i batteriet. Sätt i eller ersätt batteriet.
19. Om det är fel på displayen eller vågen inte släcks efter lång tid bör batteriet tas ut i ungefär 3 sekunder och därefter sättas i igen. Finns problemet kvar, kontakta återförsäljaren.
20. Får endast användas i privata hushåll.

